



oscident[®]



Unser Spezialgebiet: Die oszillierende interdentale Reduktion der Zahngröße

Wir von oscident sind ein Dentalunternehmen, spezialisiert auf ausgesuchte Qualitätsprodukte für die moderne Kieferorthopädie.

Unser Fokus liegt auf der vereinfachenden maschinellen Bearbeitung des Interdental Raumes in der Kieferorthopädie, der restaurierenden Prothetik oder in der Prophylaxe.

Kleiner Hub = große Wirkung.

Das Ziel ist Platz zu schaffen durch Abtrag von Kontaktpunkten, Glättung, die Beseitigung von Plaque und die finale Politur der Zahnzwischenräume durch geeignete Instrumente mit EVA Winkelstück. Dadurch optimieren wir ihren Praxisablauf und unterstützen Sie bei der Fokussierung auf Ihre Patienten.

Wir von oscident kennen optimale Lösungen für die innovative kieferorthopädische - und/oder zahnärztliche Praxis. Dieses Wissen reicht von Kieferorthopädie über die Prophylaxe bis in den Bereich der Prothetik.



Oscillierendes
EVA Winkelstück

Bei uns stehen Sie und die persönliche Beratung im Mittelpunkt

Gemeinsam finden wir ein an Ihre Bedürfnisse individuell angepasstes System und damit die beste Lösung für den reibungslosen Einsatz in Ihrer Praxis.

Bei der maschinellen Methode mit oszillierenden Instrumenten sorgt der Hub des EVA Winkelstückes für einen 5x mal so schnellen Abtrag im Gegensatz zur händischen Reduktion mit Stripstreifen. Die Instrumente arbeiten einfach, minimalinvasiv und sorgen mit Ihrer Effizienz für eine große Zeit- und Kostenersparnis.

EVA Winkelstücke sind sehr vielseitig verwendbar

Kieferorthopädie

Platz schaffen: Idealer Einsatz bei der Interdentalen Schmelz bzw. Kontaktpunkt Reduktion (IRS). Optimal mit Stripping Feilen wie beispielsweise G5-ProLign, Intensiv Ortho-Strip oder CA Stripping Tool.

Prophylaxe

Säubern und Glätten in Interdentalräumen und gewebeschonende Wurzelglättung. Instrumente für diese Techniken sind beispielsweise Profin/EVA Lamineer Tips, Proxocare und Intensiv Rootshape Produkte.

Prothetik

Präparieren und Abschrägen von Präparationsstufen in der Kronen- und Brückentechnik. Bestens geeignet dafür sind insbesondere die optimierten Proxocare, Profin/EVA Tips und Intensiv Bevelshape Tools.



T1 Line EVA 11 L Winkelstück gelb

Diese Serie eignet sich neben allen Standardanwendungen auch bestens für die professionelle Kieferorthopädie, Prothetik und Prophylaxebehandlungen. Durch die Flexibilität der Feilenjustierung ist dieses Winkelstück besonders gut für das Entfernen und Polieren von Kontaktpunkten und zum Glätten von Wurzeloberflächen prädestiniert. Die hochwertige Hand- und Winkelstückeserie T1 LINE besteht durch ihr ergonomisches Design und liegt dank der Titanhülsen federleicht in Ihrer Hand.

- 2,4:1-Untersetzung
- Eindüsenpray
- Gewicht: 65 g
- Hub-Bewegung: 1,1 mm
- mit oder ohne Lichtleiter
- 36 Monate Garantie





Ti-Max X55L eXtreme Premium Series

NSK Instrumente der Ti-Max X Serie bieten neueste Technologie, verbunden mit einem eleganten und höchst ergonomischen Design. Sie wurden ohne Kompromisse entwickelt, jedem Detail wurde höchste Aufmerksamkeit zuteil. Bestmöglicher Zugang zur Bearbeitungsstelle und maximale Sicht waren Hauptaugenmerk im Entwicklungsprozess des Instrumentenkörpers. Großartige Zuverlässigkeit und überlegener Anwender- und Patientenkomfort spiegeln die Expertise wider.

- 4:1-Untersetzung
- Einfach-Wasserstrahl
- Gewicht: 64 g
- Hub-Bewegung: 1,4 mm
- mit oder ohne Lichtleiter
- 24 Monate Garantie



ND

E-Type Connection Contra Angle Handpiece

EVA Winkelstück für den gelegentlichen Praxiseinsatz. Das Kopfteil kann in 12 Stufen auf dem Unterteil verschraubt werden und ermöglicht so dem Behandler eine ergonomische Haltung.

- 4:1-Untersetzung
- ohne Wasserkühlung
- Gewicht: 63 g
- Hub-Bewegung: 1,3mm
- ohne Licht
- 6 Monate Garantie



Ihre Vorteile in aller kürze

01 Langjährige Expertise


30 Jahre Labor- und Industrieerfahrung mit
Hauptaugenmerk auf die Kieferorthopädie.

02 Persönliche Beratung

Wir nehmen uns die Zeit für eine
fundierte und fachgerechte Beratung.

03 **oscident** steht für

Dentale Qualitätsprodukte für die moderne
Kieferorthopädie, Prothetik und Prophylaxe.

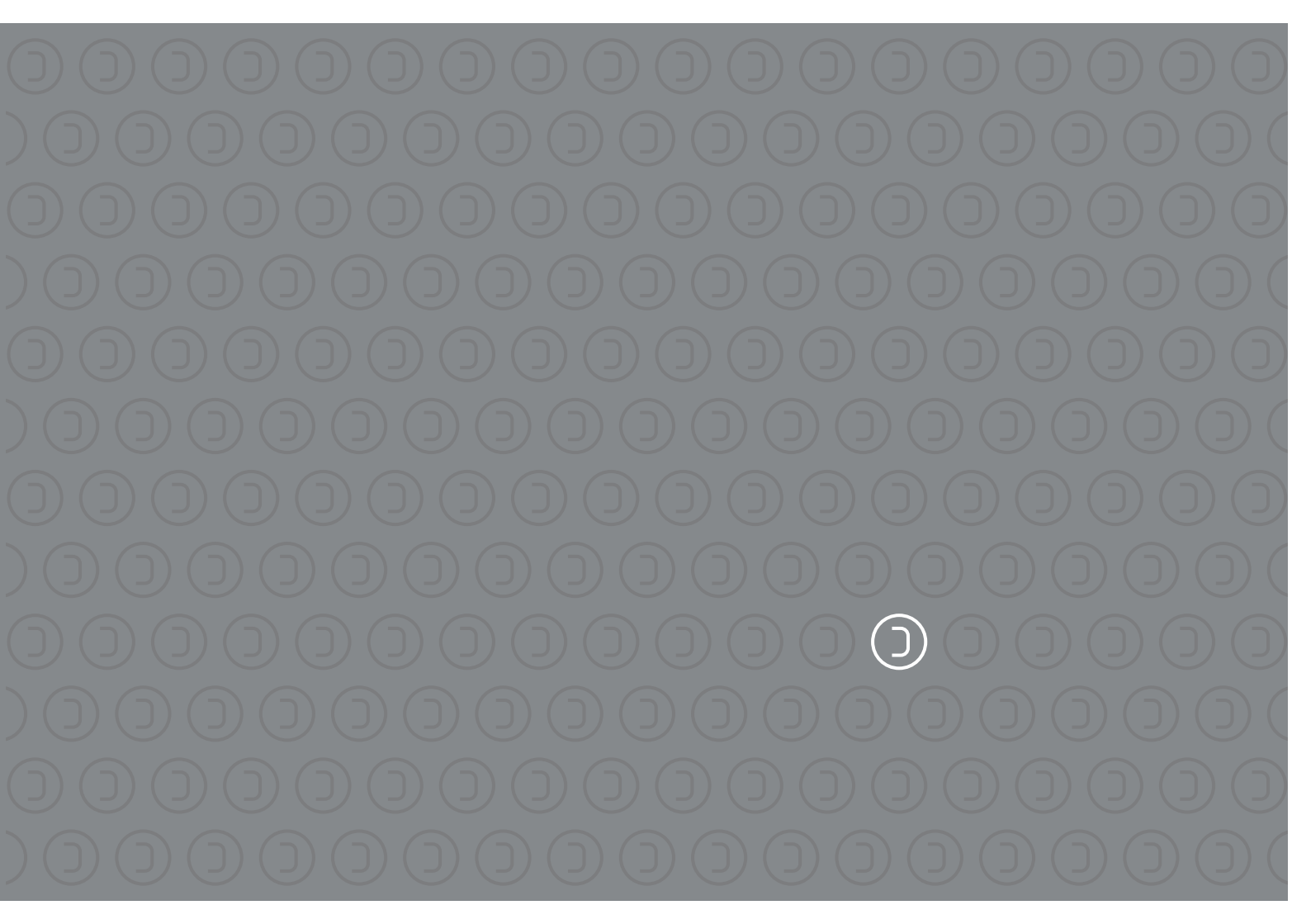

Gerne präsentieren wir Ihnen unsere Leistungsfähigkeit und Referenzen in einem persönlichen Gespräch.

Sprechen Sie uns an.

oscident[©]

oscident GmbH
Bommersheimerweg 11a
61348 Bad Homburg v.d.H.

Telefon +49 (0)6172 2663956
Mobil +49 (0)151 42680468
E-Mail info@oscident.de

www.oscident.de