



oscident<sup>®</sup>

כ

# Nuestra especialidad: la reducción oscilante interdental del tamaño del diente

oscident es una empresa dental especializada en productos de alta calidad para la ortodoncia moderna.

Nuestra atención se centra en la reducción mecánica simplificada del espacio interdental en los procesos de ortodoncia, prótesis restauradas o en las profilaxis.

Pequeño toque = Gran efecto

Nuestro objetivo es crear un espacio a través de la sistemática eliminación de los puntos de contacto, mediante el alisado, eliminación de la placa, así como el pulido final de los dientes, con la ayuda de instrumentos especialmente diseñados con un contra ángulo EVA. De esta manera optimizamos sus procesos de ortodoncia y le ayudamos para centrarse en sus pacientes. Nosotros en oscident ofrecemos soluciones óptimas para su innovadora consulta dental y/o de ortodoncia. Estos conocimientos se extienden desde la ortodoncia, sobre la profilaxis y hasta el área de la prótesis.



CONTRA ÁNGULO  
OSCILANTE EVA

# Para nosotros, usted y su asesoramiento personal son nuestra prioridad

Juntos, vamos a encontrar un sistema individualizado para satisfacer sus necesidades específicas, y por lo tanto, asegurar el uso sin problemas en su consulta.

Usando el método mecánico e instrumentos oscilantes, con el contra ángulo EVA la remoción del material dental es 5 veces más rápida que la remoción manual usando las tiras abrasivas. Los instrumentos tienen un funcionamiento simple, son mínimamente invasivos, y garantizan la eficiencia con grandes ahorros en tiempo y en coste.

# Los contra ángulos EVA son extremadamente versátiles

## Ortodoncia

Creación de espacio: Ideal para la reducción interdental de esmalte o de puntos de contacto (IRS). Uso óptimo con limas de stripping, como por ejemplo G5-ProLign, Intensiv Ortho-Strip o CA Stripping Tool.

## Profilaxis

Limpieza y alisado de los espacios interdetales y alisado radicular conservando los tejidos. Los instrumentos que usan estas técnicas son por ejemplo: Profin/EVA Lamineer Consejos, Proxocare y productos de Intensiv Rootshape.

## Prótesis

Preparación y biselado de los pasos de preparación en corona y puentes. Son ideales para estos procesos, en particular: la Proxocare optimizado, Profin/EVA Tips y herramientas Intensiv Bevelshape.



## T1 Line EVA 11 L contra ángulo amarillo

Esta serie es ideal no sólo para aplicaciones estándar, sino también para todos los usos profesionales en ortodoncia, prótesis y profilaxis. Debido a la flexibilidad del ajuste de la lima, este contra ángulo está especialmente indicado para retirar y pulir los puntos de contacto y para alisar las superficies radiculares. La alta calidad del contra ángulo serie T1 Line destaca por su diseño ergonómico y, gracias a la funda de titanio, es ligero como una pluma en la mano.

- Relación 2,4: 1
- Boquilla de aerosol
- Peso: 65 g
- Movimiento de trazo: 1,1 mm
- Con o sin fibra óptica
- Garantía: 36 meses





## Ti-Max X55L eXtreme Premium Series

Los instrumentos NSK Ti -Max de la serie X ofrecen la última tecnología, combinada con un diseño elegante y ergonómico. Han sido desarrollados hasta la perfección; cada detalle se ha hecho con el mayor escrutinio. El mejor acceso posible al campo de trabajo con la máxima visibilidad: éstas fueron nuestras prioridades en el desarrollo del cuerpo de este instrumento. Gran fiabilidad y comodidad óptima tanto para el profesional, como para el paciente reflejan nuestra experiencia y definen la tecnología de última generación de este instrumento.

- Relación 4: 1
- Boquilla de aerosol
- Peso: 64 g
- Movimiento de trazo: 1,4 mm
- Con o sin fibra óptica
- Garantía: 24 meses





# ND

## E-Type Connection para contra ángulo

Accesorio para contra ángulo EVA para el uso ocasional en la consulta. La parte superior se puede enroscar a la base en doce ángulos diferentes, permitiendo así al profesional que trabaje siempre en una posición ergonómica.

- Relación 4: 1
- Sin boquilla de aerosol
- Peso: 63 g
- Movimiento de trazo: 1,3 mm
- Sin fibra óptica
- Garantía: 6 meses



# Sus beneficios en una palabra

## 01 Muchos años de gran experiencia


30 años de experiencia en el laboratorio y en el sector, con el énfasis en la ortodoncia.

## 02 Asesoramiento personalizado

Con mucho gusto tomamos el tiempo para aconsejarles de una manera experta y profesional.

## 03 **oscient significa**

Productos dentales de alta calidad para la consulta moderna de ortodoncia, la prótesis dental y la profilaxis.

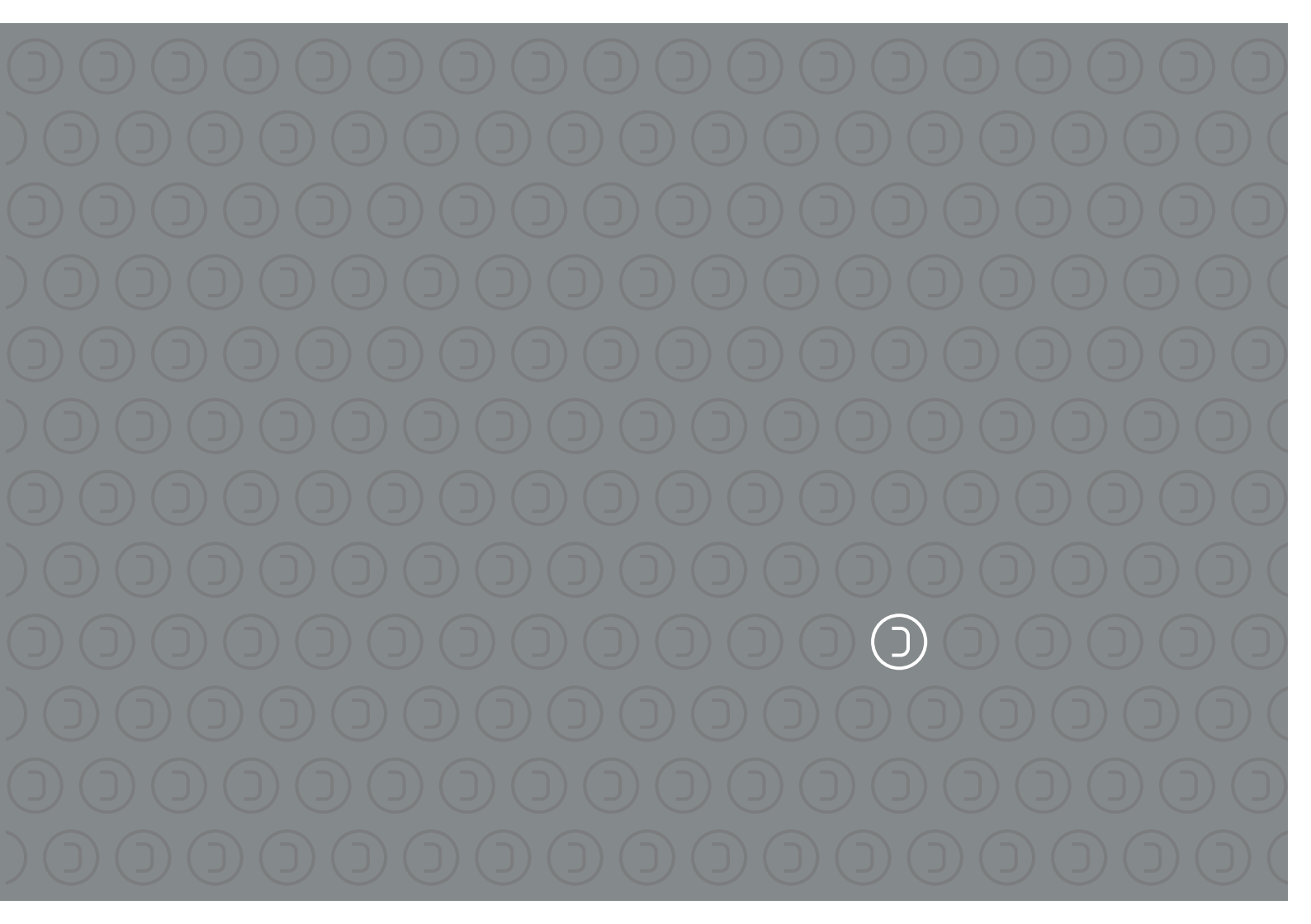

Sería un placer presentarles todo nuestro potencial y nuestras referencias mediante una entrevista personal.

Contáctenos, le estamos esperando.

oscident<sup>©</sup>

oscident GmbH

Bommersheimerweg 11a  
61348 Bad Homburg v.d.H.  
Alemania

Teléfono +49 (0)6172 2663956

Móvil +49 (0)151 42680468

E-mail [info@oscident.de](mailto:info@oscident.de)

[www.oscident.de](http://www.oscident.de)